
Instrukcja obsługi serii Compass™CX

Seria CX Compass™ kompaktowa

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginału

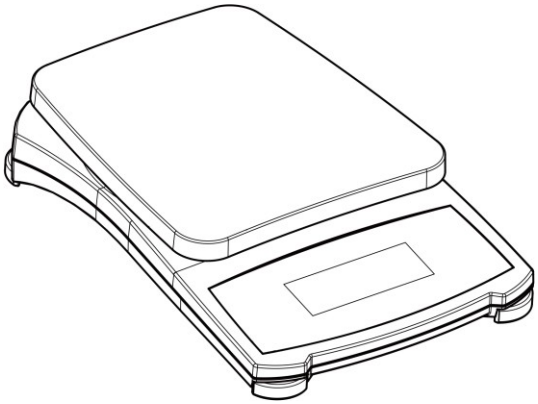

1. WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalacji i obsługi wag serii Compass™ CX. Przed użyciem wagi należy przeczytać całą instrukcję.

1.1 Środki ostrożności

Należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Należy sprawdzić, czy napięcie wejściowe zasilacza sieciowego jest zgodne z lokalnym napięciem sieciowym.
- Wagi należy używać wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy używać wagi w określonej optymalnej temperaturze roboczej.
- Nie należy używać wagi w nieprzyjaznym lub niestabilnym otoczeniu.
- Z wagi należy korzystać ostrożnie, delikatnie umieszczając przedmioty do zważenia na środku szalki. Unikanie nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniem przedłuży żywotność wagi.
- Użycie w pomieszczeniach
- Jeśli urządzenie jest używane w sposób niezgodny z zaleceniami producenta, może to wpłynąć negatywnie na jego działanie.


1.2. Ogólne cechy produktu

- **Test po włączeniu zasilania:** Po włączeniu wagi wszystkie segmenty wyświetlacza będą widoczne przez kilka sekund, co oznacza, że urządzenie samoczynnie ustawia się na zero. Gdy wyświetli się „0”, waga jest gotowa do użycia.
- **Wskazanie stabilnego odczytu:** Po osiągnięciu stabilnego odczytu w lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawi się symbol gwiazdki.
- **Przeciążenie:** Jeśli obciążenie przekroczy nośność wagi, na wyświetlaczu pojawi się litera „E” i należy natychmiast usunąć obciążenie. Waga powróci do normalnego działania.
- **Funkcja tarowania:** Do próbki można stopniowo dodawać kolejne wartości. Naciskając przycisk „”, wyświetlacz wagi powraca do zera. Po dodaniu dodatkowej masy należy nacisnąć przycisk „”, aby ponownie wyzerować wagę. Dodatkową masę można dodawać do momentu osiągnięcia nośności wagi.
- **Wartość ujemna:** Po zdjęciu obciążenia z wagi każda wyzerowana wartość będzie wyświetlana jako liczba ujemna. Aby powrócić do normalnego działania, wyzerowaną wartość można skasować, naciskając przycisk „”.
- **Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii:** Gdy baterie są słabe i wymagają wymiany, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „”.
- **Automatyczne wyłączanie:** Aby przedłużyć żywotność baterii, waga wyłączy się automatycznie po około (4) minutach, jeśli nie odbywa się żadne aktywne ważenie. Ta funkcja jest aktywna tylko w przypadku zasilania bateryjnego.

2. INSTALACJA

2.1 Zabezpieczenie transportowe (tylko model 0,1 g)

Przed użyciem należy usunąć plastikową wkładkę zabezpieczającą do transportu. Zachowaj plastikową wkładkę, aby zapewnić bezpieczny transport.

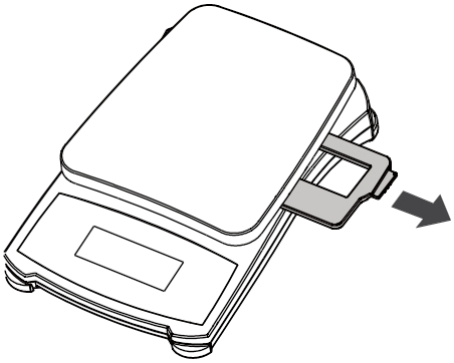


2.2 Zasilanie

Wagę należy zasilać za pomocą zasilacza sieciowego (nie wchodzi w skład zestawu) lub 3 baterii AA.

Wkładanie baterii
Zdejmij pokrywę komory baterii na spodzie wagi i umieść 3 baterie typu „AA" w komorze zgodnie z oznaczeniami. Nie używaj nadmiernej siły ani nie naciskaj szalki. Załóż ponownie pokrywę komory baterii.

Podłączenie zasilania sieciowego
Podłącz zasilacz sieciowy (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda z tyłu wagi. Podłącz zasilacz do prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.

Podstawa wagi umożliwia efektywne ustawianie jednej wagi na drugiej.
Uwaga: nie należy ustawiać więcej niż 4 wag jedna na drugiej.

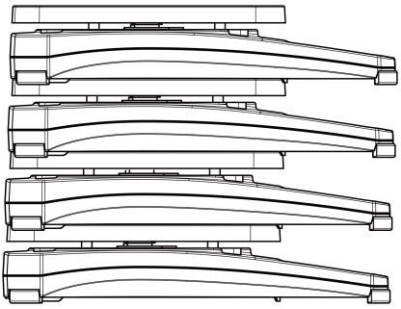

3. OBSŁUGA

3.1 Klawiatura z dwoma przyciskami

- **→0←**: Naciśnięcie tego przycisku włącza wagę. Ten sam przycisk uruchamia funkcję zerowania, gdy waga jest włączona. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez trzy sekundy, aby wyłączyć wagę.
- **g**: Krótkie naciśnięcie tego przycisku powoduje zmianę jednostki miary. Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku powoduje wejście do menu użytkownika.

3.2 Kalibracja


Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy kalibrować wagę w regularnych odstępach czasu. Jest to szczególnie ważne, jeśli waga jest używana przez dłuższy czas.


Wagi kalibracyjne nie są dołączone do wagi.

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk „g”, aż wyświetli się „mMeNU”. Zwolnij przycisk, wyświetli się pierwsze menu „CAL”.





- Naciśnij przycisk „→0←”, aby rozpocząć kalibrację zakresu.
- Na wyświetlaczu pojawia się wartość 0. Przy pustej szalce naciśnij przycisk „→0←”, aby ustawić punkt zerowy. Podczas zapisywania sygnału zerowego obciążenia na wyświetlaczu pojawia się komunikat „--C--”.

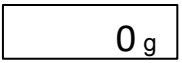

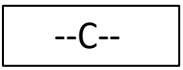


- Na wyświetlaczu pojawia się wartość punktu kalibracji zakresu, na przykład 200 g. Umieść określony ciężarek kalibracyjny na szalce i naciśnij przycisk „→0←”. Na wyświetlaczu pojawi się --C--, a waga zapisze sygnał punktu kalibracji.

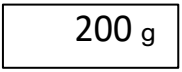


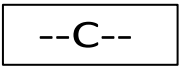

- Na wyświetlaczu pojawi się komunikat [-DONE-] i urządzenie powróci do normalnego trybu ważenia.

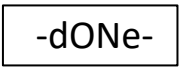

Jeśli nie zostaną wykonane kroki kalibracji lub zostanie użyty niewłaściwy ciężar, pojawi się komunikat E.

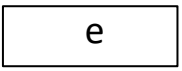

Proces kalibracji można przerwać, naciskając przycisk „g”.

3.3 Podświetlenie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ ”, aż wyświetli się „mMeNU”. Zwolnij przycisk, wyświetli się pierwsze menu „CAL”.



b.Auto Menu

- Gdy wyświetla się CAL, naciśnij przycisk , aby przejść do następnego menu b.Au.



- Naciśnij przycisk „ ”, aby ustawić podświetlenie w trybie automatycznym i powrócić do bieżącego trybu ważenia. Waga włączy podświetlenie automatycznie przy każdej operacji przyciskiem oraz podczas ważenia.

b. Menu ON

- Gdy wyświetla się b.Au , naciśnij przycisk , aby przejść do następnego menu b.ON.



- Naciśnij przycisk , aby ustawić podświetlenie na zawsze włączone i powrócić do bieżącego trybu ważenia.

Menu b.OFF

- Gdy wyświetla się b.ON, naciśnij przycisk , aby przejść do następnego menu b.OFF.



- Naciśnij przycisk , aby ustawić stałe wyłączenie podświetlenia i powrócić do bieżącego trybu ważenia.

Menu End

- Gdy wyświetla się b.OFF, naciśnij przyciski , aby przejść do następnego menu End. Naciśnij przyciski , aby powrócić do bieżącego tryb ważenia.



4. INFORMACJE SERWISOWE

Jeśli sekcja dotycząca rozwiązywania problemów nie pomoże w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym firmy OHAUS. Odwiedź naszą stronę internetową www.ohaus.com, aby znaleźć najbliższe biuro firmy OHAUS.

5. DANE TECHNICZNE

5.1 Specyfikacje

TABELA 5-1. PARAMETRY TECHNICZNE.

Model	CX221	CX621	CX1201	CX2200	CX5200
Pojemność (g)	220	620	1200	2200	5200
Czytelność (g)	0,1	0,1	0,1	1	1
Powtarzalność (odchylenie standardowe) (g)	0,1	0,1	0,2	1	1
Liniowość (g)	0,1	0,1	0,2	1	1
Masa kalibracyjna	200 g	500 g	1 kg	1 kg	2 kg
Czas stabilizacji (s)	1,5	1,5	2	1,5	1,5
Konstrukcja	Obudowa z ABS i miska ze stali nierdzewnej				
Kalibracja	Zakres zewnętrzny wybierany przez użytkownika / Cyfrowa z zewnętrznym obciążnikiem				
Zakres tarowania	Pełna nośność poprzez odejmowanie				
Jednostki wagowe*	g, N, oz, lb:oz				
Tryby pracy	Ważenie				
Wymagania dotyczące zasilania	3 baterie AA (w zestawie) lub zasilacz sieciowy (nie wchodzi w skład zestawu)				
Typowa żywotność baterii	1000 godzin				
Zakres temperatur pracy	Od 5°C (41°F) do 40°C (104°F) przy wilgotności względnej od 10% do 80%, bez kondensacji				
Zakres temperatur roboczych	Od 18°C (64°F) do 25°C (77°F) przy wilgotności względnej od 10% do 80%, bez kondensacji				
Warunki przechowywania	Od -20°C (-4°F) do 55°C (131°F) przy wilgotności względnej od 10% do 90%, bez kondensacji				
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem				
Rozmiar wyświetlacza	Cyfry o wysokości 0,71 cala / 18 mm				
Wymiary obudowy (szer. x gł.)	5 x 5,6 cala / 128 x 142 mm				
Wymiary wagi (szer. x gł. x wys.)	135 x 201 x 41 mm				
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)	170 x 235 x 55 mm				
Waga netto	0,5 kg				
Waga transportowa	0,7 kg				

* Dostępność zależy od modelu i regionu.

5.2 Zgodność

Zgodność z poniższymi normami jest oznaczona odpowiednim znakiem na produkcie.

Znak	Norma
CE	Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi normami zharmonizowanymi dyrektyw UE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC) oraz 2014/35/UE (LVD). Deklaracja zgodności UE jest dostępna online pod adresemwww.ohaus.com/ce .
	EN 61326-1



Utylizacja
Zgodnie z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) urządzenia tego nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Dotyczy to również krajów spoza UE, zgodnie z ich specyficznymi wymogami.
Prosimy o utylizację tego produktu zgodnie z lokalnymi przepisami w wyznaczonym punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W razie pytań prosimy o kontakt z właściwym organem lub dystrybutorem, u którego zakupiono to urządzenie.
W przypadku przekazania tego urządzenia innym osobom (do użytku prywatnego lub zawodowego) należy również poinformować je o treści niniejszego regulaminu. Dziękujemy za wkład w ochronę środowiska.

Instrukcje dotyczące utylizacji w Europie można znaleźć na stroniewww.ohaus.com/weee .

Uwaga FCC
Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zaleca się użytkownikowi podjęcie próby usunięcia zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmienić orientację lub przenieść antenę odbiorczą.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- W celu uzyskania pomocy skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Uwaga Industry Canada
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Certyfikat ISO 9001
System zarządzania regulujący produkcję tego produktu posiada certyfikat ISO 9001.

OGRANICZONA GWARANCJA

Produkty OHAUS są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze od daty dostawy przez cały okres obowiązywania gwarancji. W okresie obowiązywania gwarancji firma OHAUS bezpłatnie naprawi lub, według własnego uznania, wymieni wszelkie elementy, które okażą się wadliwe, pod warunkiem że produkt zostanie zwrócony do firmy OHAUS z opłaconym z góry transportem.

Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania, jeśli produkt został uszkodzony w wyniku wypadku lub niewłaściwego użytkowania, był narażony na działanie materiałów radioaktywnych lub korozyjnych, do jego wnętrza dostały się ciała obce lub w wyniku serwisowania lub modyfikacji przeprowadzonych przez podmiot inny niż firma OHAUS. W przypadku braku prawidłowo zwróconej karty rejestracyjnej gwarancji okres gwarancji rozpoczyna się w dniu wysyłki do autoryzowanego sprzedawcy. Firma OHAUS Corporation nie udziela żadnych innych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji. Firma OHAUS Corporation nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikowe.

Ponieważ przepisy dotyczące gwarancji różnią się w zależności od stanu i kraju, w celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z firmą OHAUS lub lokalnym dystrybutorem OHAUS.

Ohaus Corporation
8 Campus Drive
Suite 105
Parsippany, NJ 07054 USA Tel.:
+1 973 377 9000
Faks: +1 973 944 7177

Z biurami na całym świecie / Con oficinas alrededor del mundo / Avec des bureaux dans le monde entier / Weltweite Geshäftsstellen / Con uffici in tutto il mondo

www.ohaus.com

* 3 0 4 6 7 7 5 4 *

Nr kat. 30467754 C © OHAUS Corporation 2023, wszystkie prawa zastrzeżone / todos los derechos reservados / tous droits réservés / Alle Rechte vorbehalten / tutti i diritti riservati

Wydrukowano w Chinach / Impreso en la China / Imprimé en Chine / Gedruckt in China / Stampato in Cina